


Technique NEP

- Positionner les électrodes des membres supérieurs sur la face latérale des biceps, immédiatement sous la ligne horizontale de V4.
- Positionner les électrodes des membres inférieurs 3 pouces (7,6 cm) sous la ligne horizontale de l'ombilic et 2 pouces (5 cm) de chaque côté de la ligne verticale de l'ombilic. La distance entre les deux électrodes est de 4 pouces (10 cm).
- La position des électrodes précordiales (V1 à V4) ne change pas. V1 et V2 dans le 4^{ème} espace intercostal parasternal. V4 dans le 5^{ème} espace intercostal. V3 entre V2 et V4 sur la 5^{ème} côte. V6 sur la ligne mid-axillaire, à la même hauteur que V4. V5 entre V4 et V6.

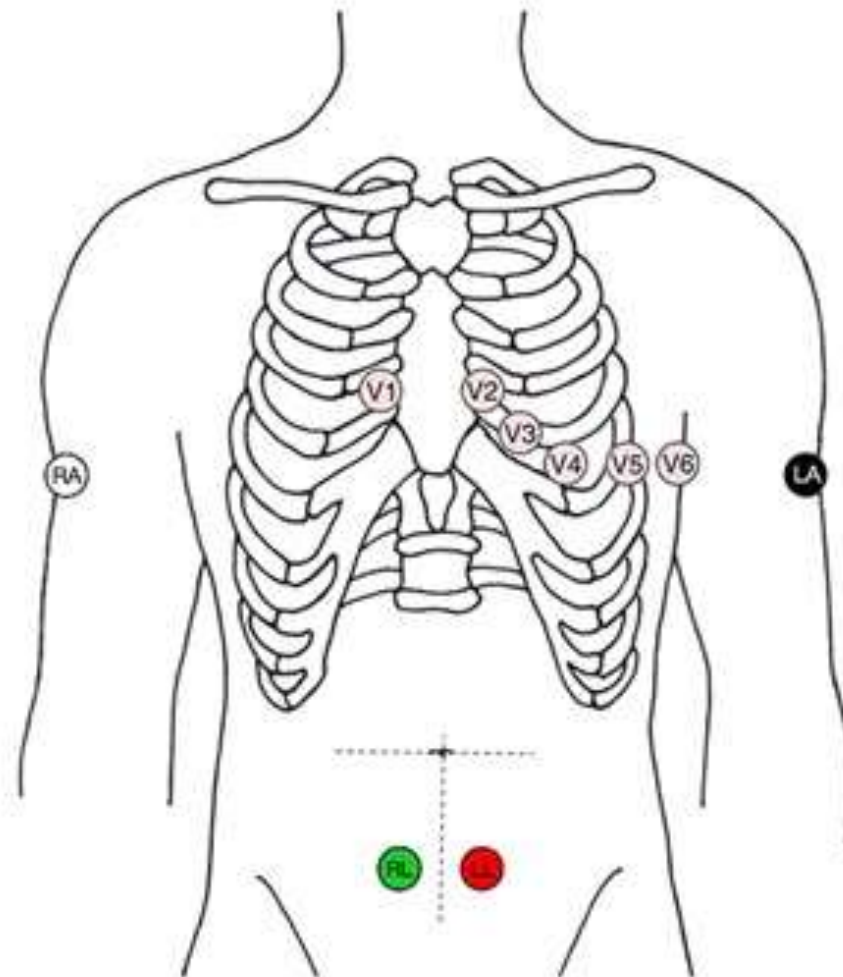

Source: KHAN, G, A new electrode placement method for obtaining 12-lead ECGs, Openheart, mai 2015, modifié